


دستگاه تایتن Power

محرك الكتریکی عضله

EMS Device

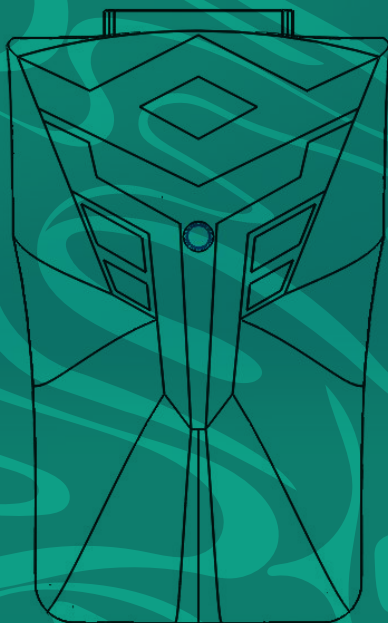

قهرمان خودت باش

درباره ما

در ابتدا، تیم تایتان از شما به خاطر خواندن این دفترچه تشکر می‌کنند

تایتان، نوآوری است که برای یک استفاده تازه به وجود آمده است، به همین دلیل مهم است که مقداری از وقتتان را به درک آن اختصاص دهید

تکنولوژی بکار رفته در تایتان (الکتروتراپی) تحریک الکتریکی که دستگاه تایتان ایجاد می‌کند، از یک فرآیند طبیعی الهام گرفته شده است که توسط مغز کنترل می‌شود، به این صورت که با توجه به فرکانس انتخاب شده، قدرت و زمان، یک جریان الکتریکی تولید می‌شود که درد را تسکین داده، به ریلکس شدن کمک کرده و در آزادی کامل عضلات شما را تقویت می‌کند

تایتان ساده، قدرتمند و مؤثر است

و علاوه بر این، تصور منفی در مورد تحریک الکتریکی را از بین می‌برد

نوآوری بزرگترین قدرت تایتان

ما یک استارت آپ در حال رشد هستیم و تمام وقت در خدمت شما خواهیم بود تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اتمام لوازم مصرفی یا نیاز به دستگاه‌های جدید در اسرع وقت رفع و رجوع کنیم

ساخته شده توسط

شرکت سلامت اندیشان ممتاز ماد

گارانتی

تایتان برای 2 سال تحت ضمانت بدون قید و شرط است. این ضمانت نامه تنها شامل خود دستگاه می شود. پدهای الکتروود، کابل های الکتروود، لباس های اکتیو، کابل شارژر، یا تبلت شامل آن نمی شوند

ضمانت نامه ی تایتان تنها در صورتی تایید می شود که از دستگاه برای هدف اصلی آن استفاده شده باشد و به خاطر استفاده اشتباه دستگاه آسیب ندیده باشد. تصادفات، غفلت، نگهداری اشتباه، تعمیر یا اصلاح دستگاه توسط فردی غیر از ماموران تایید شده شامل این ضمانت نامه نمی شود. در صورت بروز مشکل، همراه با فاکتور خرید به یکی از نمایندگی ها مراجعه کنید

برای هرگونه مشکل حل نشده با ما تماس بگیرید

تلفن : ۰۲۱ - ۲۸۴۲۱۳۵۲

وبسایت : www.ititan.me

تیم سازنده تایتان

معرفی

- هدف استفاده از دستگاه و موارد استفاده -

تایتان برای تقویت عضلات ، کاهش توده چربی و ریکاوری پس از تمرین طراحی شده است

- کاربران هدف -

بدون محدودیت سنی

- مقررات عملکرد -

تایتان سیستم مدرن و فشرده ورزشی با تکنولوژی ای ام اس است که با پوشیدن جلیقه مخصوص و ارسال پالس های الکتریکی مدیریت شده به تمام عضلات بدن از طریق پدهای الکتروود باعث تحریک الکتریکی غیر ارادی عضلات در طول جلسات 20 دقیقه ای میشود و برای ساعت ها بعد از آن کالری قابل توجهی سوخته میشود که تاثیرات آن بعد از چهارجلسه به وضوح قابل رویت است، در صورت مدیریت برنامه و ورزشیم غذایی میتوان با این روش در مدت کوتاهی به اندام ایده آل خود رسید. این سیستم ورزشی به غیر از موارد خاص، قابل استفاده برای همه (بانوان، آقایان) و کلیه سنین است و هیچگونه عوارض جانبی بلند مدت ندارد



سیستم تایتان

دستگاه تایتان پاور



تولید کننده پالس های الکتریکی EMS

نرم افزار تایتان



مدیریت دستگاه های تایتان پاور

تبلت همراه استند



فرستنده و مدیریت پاور باکس ها با نرم افزار تایتان

لباس تایتان همراه کابلها



جلیقه های اکتیو برای اتصال دستگاه

پد الکترو



انتقال دهنده پالس های الکتریکی به عضلات

لباس زیر EMS



لباس و شلوارک شخصی کاربر تایتان

آبپاش



خیس کننده پدها برای انتقال بهتر پالسها

ساک و ست مربی



ساک لباس و دستگاه تایتان

آداپتور و شارژر



شارژر و آداپتور دستگاه تایتان

دفترچه راهنما



فایل آموزشی استفاده از سیستم تایتان

مزایای جانبی

■ متحول کننده

متد تایتان غیر تهاجمی است ، و نزدیک ترین راه به تقویت عضلات با بیشترین درصد اثرگذاری است ، کافیت جلیقه تایتان را بپوشید و تایتان پاور را به آن وصل کنید. آن را روشن کنید و روی شدت مناسب قرار دهید

■ قابل حمل

دستگاه را تا حد ممکن کوچک کردیم تا بتوانید آن را هرجایی ببرید، تایتان به شما اجازه می دهد که فعالیت های روزانه خود را انجام دهید، شما می توانید وقتی از آن استفاده نمی کنید، آن را در کیف دستی خود حمل کنید

■ قدرتمند

ما اولین تیمی در ایران هستیم که هسته (دستگاه تایتان) را از سیستم مدیرینی آن (اپلیکیشن) جدا کردیم تا هزینه فروش آن را کم کنیم زیرا مهم و گران ترین فناوری ، نرم افزار تایتان در گوشی شما موجود است

■ بی سیم

این سیستم ای ام اس با جدیدترین فناوری بلوتوث فاقد کابل است و امکان حرکت بیشتر در فضای تمرین را چه در داخل و چه در فضای باز فراهم می کند

■ موثر

تایتان پاور بر روی کارایی متمرکز است. تمرین ای ام اس به معنای صرفه جویی در وقت برای مربیان و مشتریان است. در مدت زمان 20 دقیقه به اندازه 3 جلسه تمرین منظم ورزش کنید

با تایتان آرزوی رسیدن به سطح بالاتری از تناسب اندام و کمال را داشته باشید

تایتان پاور

تایتان پاور یک دستگاه (ای ام اس) محرک الکتریکی عصب و عضله از طریق پوست است که به عنوان یک سیستم کاهش درد و تقویت عضلات از طریق الکتروتراپی عمل می‌کند. دستگاه از طریق الکترودهایی که به پوست وصل هستند و روی اعصاب خارجی قرار دارند، پالس‌های الکتریکی با شدت کم به بدن ارسال می‌کند. ای ام اس مخفف تحریک الکتریکی عضله یا است. دستگاه که تولید کننده پالس های الکتریکی است به وسیله الکتروده به عضلات مد نظر متصل می شود و تعداد و شدت انقباض در ثانیه افزایش می یابد. امروزه از این روش تمرینی جدید برای لاغری - عضله سازی و بازیابی توان بدنی استفاده میشود



با تایتان قهرمان خود باشید

قلب سیستم

کوچک ، سبک و کارآمد اما قدرتمند

کانالهای مجزا

عضلات بدن با یکدیگر متفاوت هستند و هر کدام باید با فرکاس خاصی تحریک شوند ، بنابراین دستگاه ماهیچه ها را به 9 گروه تقسیم کرده و با 9 کانال مجزا ماهیچه ها را تحریک و فعال میکند که نتیجه بسیار متفاوتی بر روی بدن دارد

تمرین گروهی

یکی از قابلیت های دیگر سیستم تایتان تمرین گروهی به صورت همزمان میباشد . به گونه ای که 2 تا 8 نفر در یکزمان میتوانند با برنامه تمرینی گروهی و یا برنامه تمرینی شخصی برای هر کاربر تمرین کنند که شبیه سازی یک باشگاه ورزشی کامل است

تمرینات بدون وزنه

تمرین با تایتان تمرینی بدون وزنه است. این تکنولوژی تمرین و رشد عضلات بدن رو بدون هرگونه فشار اضافه به مفاصل و تاندون ها ممکن کرده است. حتی اگر در حین فعالیت دیگری دچار آسیب دیدگی شدید و مصدومیت شوید می توانید با تایتان و شبیه سازی ورزش مورد نظر بر روی بدن به تمرین ادامه بدید و از افت آمادگی جسمانی جلوگیری کنید



مشخصات فنی

123 mm . 76mm . 23mm : ابعاد

250 gr : مقدار وزن

9 channel,
Symmetric-Rectangular-Biphasic : کانال و فرم موج

0-50 mA into 1K ohms : جریان خروجی

100 micro sec : عرض پالس

350 pps : سرعت پالس

0-50 mA into 1K ohms load، قابل تنظیم : دامنه ولتاژ خروجی

3.7 V Li-Ion، 7000mAh باتری قابل شارژ : منبع تغذیه

تقریباً 2 سال : عمر باتری

دامنه دمایی: +5 تا +40 درجه سانتی گراد : شرایط محیطی
دامنه رطوبت نسبی: 15%-93% ، بدون تقطیر : عملکرد
دامنه فشار محیط : 700 hPa تا 1060 hPa

دامنه دمایی: -25 تا +70 درجه سانتی گراد : شرایط محیطی
دامنه رطوبت نسبی: 15%-93% ، بدون تقطیر : نگهداری و حمل و نقل

شارژ تایتان

مدت جلسات تایتان ۲۰ الی ۲۵ دقیقه میباشد و هر برنامه بعد مدت زمان مشخص شده متوقف و نیازمند شروع دوباره میباشد ، برای شارژ کردن دستگاه تایتان ، از شارژر گوشی تلفن همراه، تبلت، یا پورت کامپیوتر استفاده کنید ، وقتی تایتان را به برق وصل کنید، فرآیند شارژ شدن آغاز می شود



بعد از شارژ کامل می توانید ۱۰ الی ۲۰ جلسه از تایتان استفاده کنید



- هشدار -

- در هنگام شارژ شدن، امکان استفاده از دستگاه وجود ندارد
- وقتی کابل الکترودها به دستگاه وصل نیستند، تایتان را به کار نیندازید. قبل از جدا کردن یا وصل کردن الکترودها، مطمئن شوید که دستگاه خاموش است
- در صورت قطع شدن اتصال دستگاه به اپلیکیشن چراغ چشمک زن قرمز بر روی دستگاه به نمایش درمی آید و بعد از ۱۰ ثانیه دستگاه خاموش میشود

لباس تایتان

لباس تایتان به طور دو تیکه و در حالت یکپارچه در اطراف بدن قرار می گیرد ، حداکثر بهداشت شخصی و آزادی حرکت را فراهم می کند. در لباس تایتان خود احساس عالی خواهید داشت و همیشه یک آموزش بسیار موثر خواهید داشت. لباس های تایتان سبک هستند و دارای گارانتی یکساله میباشند. لباس های تایتان شما به راحتی در ماشین لباسشویی شسته می شوند

بدون محدودیت ورزش کنید

در بخش حرفه ای ، تایتان به طور چشمگیری ثابت کرده است که امکان انجام تمرینات ای ام اس بی سیم با آزادی حرکت کامل وجود دارد


شبیه ساز هر نوع ورزش و برنامه ای

بدنسازي ، کراس فیت ، پیلاتس یا یوگا. عضله سازی ، استقامت یا کاهش توده چربی

با خیال راحت ، موثر و بهداشتی آموزش دهید

اپلیکیشن تایتان

برای این که تایتان هم به نیازهای امروز شما پاسخ دهد و هم به نیازهای آینده، طیف وسیعی از برنامه‌ها در اختیار تان قرار داده است. برنامه‌ای که برای شما مناسب است را در کنار یک ایستگاه فعالیت انتخاب کنید و آن را طی چند ثانیه با لمس انگشتان، اجرا کنید

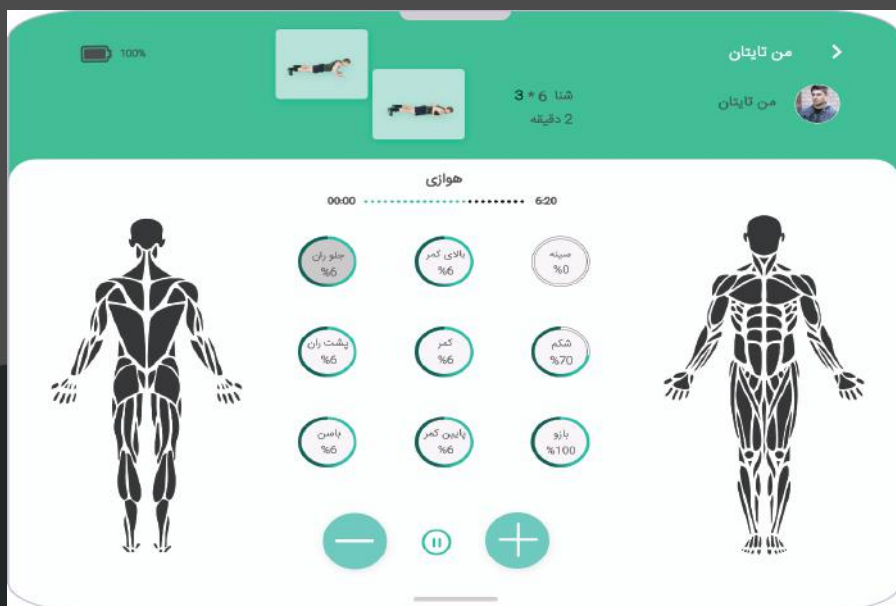

- یادداشت -

تایتان مجهز به آخرین تکنولوژی بلوتوث با مصرف بسیار کم () است و باتری تلفن هوشمندتان را سریع تمام نمی‌کند



با تایتان قهرمان خود باشید

هوشمند ورزش کنید

نرم افزاری پیشرفته و قابل ارتقاء که با کاربری راحت برای سیستم عامل اندروید / آی او اس تعبیه شده است برای کنترل دستگاه تایتان پاور

رابط کاربری موثر

طراحی هوشمندانه و رابط کاربری بصری ساده و جذاب که استفاده از ای ام اس را بسیار راحت و تأثیرگذار می نماید

برنامه های متفاوت

وجود برنامه های تمرینی مختلف که استفاده از آنها می تواند نقطه شروع مناسبی برای دستیابی به اهداف گوناگون کاربران شما باشد مانند

تمرینات هوازی

برنامه هوازی سطوح استقامتی اساسی را تمرین می دهد ، که پایه ای برای برنامه های آموزشی بیشتر است. این برنامه ۲۰-۱۵ دقیقه ای برای بهبود استقامت پایه است

قدرت

از برنامه قدرتی برای عضله سازی استفاده می شود. همچنین می توانید از بین پارامترها و طول تمرینات مختلف یکی را انتخاب کنید

چربی سوزی

برنامه سوزاندن چربی عضلات و تحریک متابولیسم را ترکیب می کند ، در نتیجه چربی سوزی را تقویت می کند. همراه با زمان تمرینات طولانی تر ، چربی سوزی به حالت توربو می رود خداحافظی با سلولیت

ماساژ

این برنامه با انقباض های شل کننده مختلف باعث شل شدن عضلات می شود. برنامه ماساژ روشی ایده آل برای ریکاوری عضلات پس از یک تمرین سنگین است

استودیو تایتان

شما با کمترین امکانات میتوانید کسب کار پربرونقی را راه اندازی کنید

در ابتدا نیاز به یک فضای نه چندان بزرگ و دکوراسیونی ورزشی و پرا انرژی دارید. نیازی نیست این فضا مانند باشگاه ورزشی بزرگ و دارای امکانات متعدد باشد. چند وزنه کوچک و چند وسیله هوازی کفایت میکند

در این باشگاه کوچک ورزشی کار اصلی را دستگاه های تایتان انجام میدهند. به گونه ای که با تمرینات مناسب توسط مربی مربی و با پالسهایی که دستگاه از طریق جلیقه ها به بدن شما اعمال میکند باعث چربی سوزی و عضله سازی میگردد

MICRO STUDIO

روش های کسب و کار

فقط در یک فضای ۶۰ متر مربعی بدون نیاز به هیچ تجهیزاتی، کسب و کار شخصی خودتان را راه اندازی کنید و همزمان با افزایش تعداد مشتریان، آن را گسترش دهید.

SHOP in SHOP

فقط با اختصاص یک فضای ۱۰ متر مربعی امکان ایجاد یک باشگاه EMS را در فضاهای موجود مانند باشگاه های ورزشی، کلینیک ها، مراکز درمانی و زیبایی فراهم آورید. این بدان معنی است که می توان دستگاه میها بادی تک را به خوبی به عنوان نوعی سرویس مجزا و با کیفیت به امکانات فعلی خود افزود.

MOBIL GYM

عدم وابستگی به مکان یا زمانی خاص، فرصت های گوناگونی را در اختیار میگذارد.



- خدمات پس از فروش -

خدمات نصب و آموزش سیستم	
خدمات تعمیر و تعویض دستگاه	
خدمات فروش و تعمیر لباسهای تایتان	
مشاوره بازاریابی و طرح کسب و کار	
خدمات طراحی و تجهیز استودیو	
خدمات آموزشی برای مربیان شامل آموزشهای مقدماتی و حرفه ای	
فروش لوازم جانبی و مصرفی	
پشتیبانی فنی و اجرایی	

- منع استفاده -

دستگاه‌های تایتان ممکن است روی عملکرد ضربان‌ساز قلبی تاثیر بگذارند، بنابراین نباید توسط بیماران قلبی که از ضربان‌ساز، دفیبریلاتور ایمپلنت شده، هر ایمپلنت فلزی دیگر یا دستگاه الکتریکی استفاده می‌کنند، به کار برده شوند. استفاده در این صورت ممکن است منجر به شوک الکتریکی، سوختگی، تداخل الکتریکی یا مرگ شود

- زنان باردار

- افراد دارای شرایط و بیماری‌های خاص با هماهنگی پزشک

- واکنش‌های مغایر -

■ استفاده از دستگاه ممکن است باعث سوزش پوست زیر الکترودها شود

■ در تحقیقات سوختن پوست زیر الکترودها هم گزارش شده است

■ قرار دادن الکترودها در نزدیکی قفسه سینه ممکن است ریسک بهم ریختن ضربان قلب یا فیبریلاسیون قلبی را افزایش دهد

■ ممکن است فرد به نوار یا چسب ژل پد واکنش آلرژیک نشان دهد

■ تحریک بلند مدت یک ناحیه ممکن است باعث سوزش و تحریک پوست شود

■ ممکن است کاربران در هنگام یا بعد از تحریک الکتریکی، در نزدیکی چشم‌ها یا روی سر و صورت احساس درد کنند یا دچار سردرد شوند

ضمانت بازگشت وجه

محصولات تایتان دارای ۳۰ روز ضمانت بازگشت وجه هستند

در صورتی که محصول را آنلاین از سایت تایتان یا بطور مستقیم از شرکت سلامت اندیشان خریداری کرده باشید ، ضمانت ۳۰ روز بازگشت وجه در صورت عدم رضایت را دریافت خواهید کرد

با مراجعه به سایت تایتان و پر کردن فرم بازگشت وجه ، کارشناسان ما موضوع را بررسی کرده و در طی تماس با شما پیگیری انجام میشود ، پس از دریافت محصول و با تایید شرایط ذکر شده در قسمت توضیحات بازگشت وجه در وبسایت تایتان طی حداکثر ۳۰ روز کاری میزان تعیین شده وجه به شما بازگردانده میشود

رضایت و سلامتی کاربران شما اولویت ما در تایتان است

برای هرگونه مشکل حل نشده با ما تماس بگیرید

۰۲۱ - ۲۸۴۲۱۳۵۲

: تلفن

www.ititan.me

: وبسایت

تیم سازنده تایتان

اطلاعات تماس



iItan

تلفن :	۰۲۱ - ۲۸۴۲۱۳۵۲
وبسایت :	www.ititan.me
ایمیل :	info@ititan.me

تهران، تجریش، محله آجودانیه
بلوار ارتش، خیابان شهید ابوالفضل سمیع
پلاک ۵، طبقه همکف